

OZONOSAN boardcase



Mobiler Ozongenerator für Hausbesuche, als Zweitgerät und vieles mehr.

Das OZONOSAN boardcase ist als Koffergerät mit interner Sauerstoffflasche eine vollständig mobile Einheit z.B. für Hausbesuche. Hervorragend geeignet für alle systemischen und topischen Anwendungen in der Schmerztherapie oder für die Große Eigenblutbehandlung mit Ozon.

Produkt highlights

Kontinuierliche photometrische Konzentrationsmessung mit automatischer Kalibrierung.

Mobile Einheit, flexibel und unabhängig vom Patientenstandort.

Betrieb mit interner oder extern angeschlossener Sauerstoffflasche.

Leistungsstarker Katalysator zur Entsorgung von Restozon.

Nutzerfreundliches Bedienkonzept.

Wartungsarm bei gleichzeitig überdurchschnittlicher Produktlebensdauer.

In Deutschland entwickelt und produziert.



Technische Spezifikation	OZONOSAN boardcase
Aufbau	Koffer, trag- und rollbar
Funktionsweise	Normobare Infusionstechnik
Konzentration Ozon	1 - 50 µg/ml
Volumenstrom	1 - 12 l/min, abhängig von der Konzentration
Arbeitsdruck	0,5 bar
Vakuumpumpe	Optional erhältlich, bis -0,8 bar stufenlos einstellbar
Wasseraufbereitung mit Ozon	OZONOSAN WOG optional erhältlich
Abmessung [H x B x T]	19 x 55 x 40 cm
Gewicht	17,5 kg inklusive Sauerstoffflasche
Elektrische Daten	230 V AC; 50 Hz; 1.2 A; Schutzklasse I
Klassifizierung	Ila Medizinprodukt gemäß EU Richtlinie 93/42/EWG
Gewährleistung	2 Jahre; 5 Jahre auf Ozonröhre und Katalysator

Hänsler Medical - Vertrauen Sie nur dem Original.

Anwendungsformen

OZONOSAN boardcase

Große Eigenblutbehandlung ●

Kleine Eigenblutbehandlung ●

Rektale Insufflation ●

Beutelbegasung ●

Unterdruckbegasung mit Saugglocke ●

Ozon-Injektionen ●

Ozonisiertes Wasser Optional




Behandlungssets für die Ozontherapie

OZONOSAN Set 4 Plus für die Große Eigenblutbehandlung



- 1 OZONOSAN Vakuumflasche 250 ml, Mikroperl-System, 12 ml Natriumcitrat als Gerinnungshemmer, latexfrei
- 1 Transfusionsbesteck mit Stahlspitze
- 1 Perfusionsbesteck wahlweise 0,8 oder 1,1 mm Nadel
- 1 Einmalspritze 50 ml silikonisiert
- 1 Keimstopp Einleitungssystem

OZONOSAN Set Rektale Insufflation mit Dosierbalg

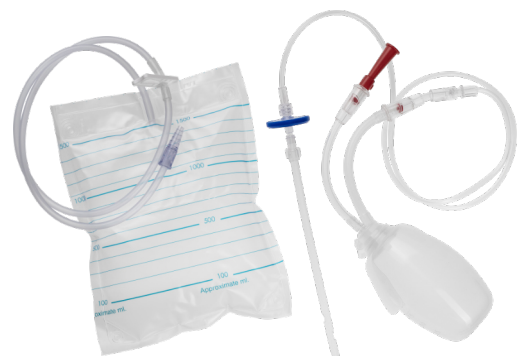

- 1 Dosierbalg
- 5 Ozon Vorratsbehälter mit Ventil
- 50 Spezialkatheter 18 Ch.
- 50 Schlauchverbinder 75 cm
- 50 Bakterienfilter

Hänsler Medical GmbH

Nordring 8, 76473 Iffezheim, Germany

+49 (0) 7229 3046 0

@ info@haensler-medical.com

www.haensler-medical.com

