

Das OZONOSAN photonik ist als Tischgerät ideal für Anwendungen in kleineren Arztpraxen. Dieses System erzeugt Ozonkonzentrationen zwischen 2 und $\leq 75 \mu\text{g/ml}$ für alle systemischen und topischen Anwendungen. Eine Wasserozonisierungseinheit ist separat erhältlich.



OZONOSAN photonik mit WOG

Produkthighlights

Kontinuierliche, photometrische Konzentrationsmessung mit automatischer Kalibrierung.

Leistungsstarker Katalysator zur Entsorgung von Restozon.

Wasserozonisierungseinheit kann optional angeschlossen werden.

Nutzerfreundliches Bedienkonzept.

Wartungsarm bei gleichzeitig überdurchschnittlicher Produktlebensdauer.

In Deutschland entwickelt und produziert.

Technische Spezifikation	OZONOSAN photonik
Aufbau	Tischgerät kompakt
Funktionsweise	Normobare Infusionstechnik
Konzentration Ozon	2 - 75 $\mu\text{g/ml}$
Volumenstrom	0,5 - 10 l/min
Arbeitsdruck	0,5 bar
Vakuumpumpe	Optional, bis -0,8 bar einstellbar
Wasseraufbereitung mit Ozon	OZONOSAN WOG optional erhältlich
Abmessung [H x B x T]	56 x 20 x 37,5 cm
Gewicht	20 kg
Elektrische Daten	230 V AC; 50 Hz; 1.2 A; Schutzklasse I
Klassifizierung	Ila Medizinprodukt gemäß EU Richtlinie 93/42/EWG
Gewährleistung	2 Jahre; 5 Jahre auf Ozonröhre und Katalysator

Anwendungsformen

OZONOSAN photonik

Große Eigenblutbehandlung ●

Kleine Eigenblutbehandlung ●

Rektale Insufflation ●

Beutelbegasung ●

Unterdruckbegasung mit Saugglocke ●

Ozon-Injektionen ●

Ozonisiertes Wasser Optional



Behandlungssets für die Ozontherapie

OZONOSAN Set 4 Plus für die Große Eigenblutbehandlung



1 OZONOSAN Vakuumflasche 250 ml, Mikroperl-System, 12 ml Natriumcitrat als Gerinnungshemmer, latexfrei


1 Transfusionsbesteck mit Stahlspitze

1 Perfusionsbesteck wahlweise 0,8 oder 1,1 mm Nadel

1 Einmalspritze 50 ml silikonisiert

1 Keimstopp Einleitungssystem

OZONOSAN Set Rektale Insufflation mit Dosierbalg

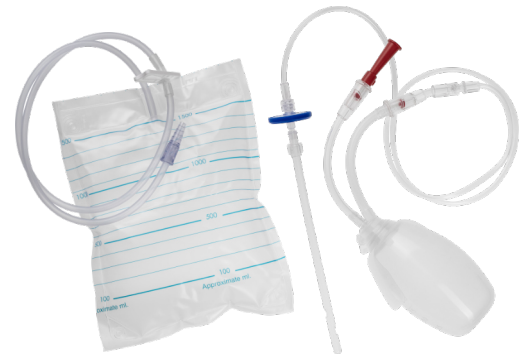

1 Dosierbalg

5 Ozon Vorratsbehälter mit Ventil

50 Spezialkatheter 18 Ch.

50 Schlauchverbinder 75 cm

50 Bakterienfilter

Hänsler Medical GmbH

Nordring 8, 76473 Iffezheim, Germany

+49 (0) 7229 3046 0

@ info@haensler-medical.com

www.haensler-medical.com

